



In-Kone® SCHEDA TECNICA

Capitolo 4: Protesi singola

Sezione 4: TiBase ASC Dynamic In-Kone® ST



ZI de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux,
69530 BRIGNAIS – FRANCIA
Tel.: +33 (0)4 78 56 97 00 – Fax: +33 (0)4 78 56 01 63
www.globald.com

Il presente documento è destinato ai chirurghi odontoiatri e ai laboratori di protesi. Descrive passo dopo passo la procedura di singola riabilitazione con un impianto della gamma In-Kone® ST tramite una piattaforma per compensazione dell'asse.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI DEI TIBASE CON CANALE DI ACCESSO ANGOLATO

Questa piattaforma è adatta alle riabilitazioni singole anteriori che richiedono una compensazione dell'asse angolato. Non usare le versioni non indicizzate come ponte applicabile direttamente sull'impianto.

Per il loro diametro di 4 mm, le posizioni interessate sono il settore **premascellare** (da 5 a 5) e quello sinfisario. Le altre posizioni sono controindicate. La piattaforma in titanio è **specificata** e permette di riorientare il canale di accesso della vite rispetto all'asse dell'impianto tridimensionalmente, con un **angolo massimo compreso tra 20° e 40° a seconda della configurazione** (v. figure in caratteristiche). Si tratta quindi di uno strumento di ottimizzazione protesica.

In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle indicazioni per l'uso, potrebbero verificarsi delle complicanze.



PRECAUZIONI PER USO E ESTRAZIONE

GENERALI

- Utilizzare il cacciavite Dynamic contrangolo con il relativo adattatore. Per facilitare l'applicazione delle viti non imperdibili in bocca, è disponibile un portaviti.
- L'uso di un canale di avvitatura angolato non consentirà più l'impiego dell'estrattore per monconi dopo lo smontaggio; per questo, quando verrà smontata la corona, si utilizzerà una pinza.
- Fare le dovute prove **senza serrare il dispositivo**.
- Per l'impronta devono essere utilizzati i transfert e gli analoghi classici e digitali Global D.

PRESSO LO STUDIO DENTISTICO

- La coppia di serraggio della protesi definitiva è di 25 N.cm.**
- Per evitare di danneggiare l'impronta della vite, prima di serrare alla coppia definitiva, accertarsi che il cacciavite sia correttamente inserito nella vite.
- Per agevolare lo smontaggio della corona avvitata, svitare la vite, verificare che non sia più inserita nell'impianto, se è imperdibile, e infine utilizzare preferibilmente una pinza, come mostrato in figura.

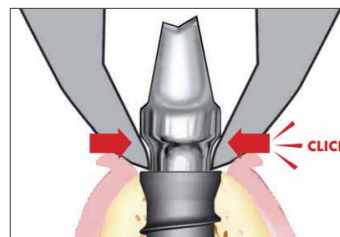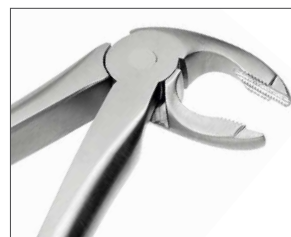

In caso di difficoltà, si invita a contattare Global D.

- In caso di restauro estetico immediato, adattare il serraggio della vite.**

IN LABORATORIO

- Utilizzare una vite diversa da quella definitiva.
- Incollaggio fuori dalla bocca in laboratorio; in caso di **vite imperdibile**, ricordarsi di inserirla nel TiBase prima di incollare la corona.
- Previa richiesta, è disponibile una biblioteca complementare specifica con la relativa guida di avviamento rapido.
- Le raccomandazioni di pulizia e sterilizzazione sono le stesse attuate per le protesi provenienti dal laboratorio di protesi dentarie.

CARATTERISTICHE:

- 1ª SOLUZIONE: CON UNA CAVITÀ CHE CONSENTE IL PASSAGGIO DELLA VITE**

Angolo max	40°	25°	SISTEMA STANDARD
Altezza parodontale AG	1 mm	2 mm	
Rif. TiBase indicizzato	31.310.152.01-2	31.310.152.02-2	
Rif. TiBase non indicizzato	31.320.152.01-2	31.320.152.02-2	
Rif. Vite*	41.318.077.02-2	41.318.077.02-2	



* consegnata confezionata singolarmente con TiBase

● **2ª SOLUZIONE: CON VITE IMPERDIBILE**


Angolo max	25°	20°	25°	25°	SISTEMA VITE IMPERDIBILE (CS)
 Vite da inserire nella piattaforma prima dell'incollaggio					 Vite Dynamic (standard) Rif. 41.318.077.02-2  Vite Dynamic lunga Rif. 41.318.111.01-2
Altezza parodontale AG	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	
Rif. TiBase indicizzato	31.310.152.01-2	31.310.152.02-2	31.310.152.03-2	31.310.152.04-2	
Rif. TiBase non indicizzato	31.320.152.01-2	31.320.152.02-2	31.320.152.03-2	31.320.152.04-2	
Rif. Vite*	41.318.077.02-2	41.318.077.02-2	41.318.111.01-2	41.318.111.01-2	

* consegnata confezionata singolarmente con TiBase

Soluzione con diametro vite ridotto a Ø 2 mm, per una riduzione della cavità fino al 32% <=> Aumento del volume della protesi

ELENCO RIFERIMENTI E MATERIALE NECESSARIO ** (AG: ALTEZZA PARODONTALE)

GAMMA	AG Altezza Parodontale	Riferimento articolo	Denominazione commerciale IT	Rif. vite da consegnare con TiBase
   	1	31.310.152.01-2	TiBase Dynamic XNP indicizzato G1 Comp.0152	41.318.077.02-2
	2	31.310.152.02-2	TiBase Dynamic XNP indicizzato G2 Comp.0152	41.318.077.02-2
	3	31.310.152.03-2	TiBase Dynamic XNP indicizzato G3 Comp.0152	41.318.111.01-2
	4	31.310.152.04-2	TiBase Dynamic XNP indicizzato G4 Comp.0152	41.318.111.01-2
   	1	31.320.152.01-2	TiBase Dynamic XNP non indicizzato G1 Comp.0152	41.318.077.02-2
	2	31.320.152.02-2	TiBase Dynamic XNP non indicizzato G2 Comp.0152	41.318.077.02-2
	3	31.320.152.03-2	TiBase Dynamic XNP non indicizzato G3 Comp.0152	41.318.111.01-2
	4	31.320.152.04-2	TiBase Dynamic XNP non indicizzato G4 Comp.0152	41.318.111.01-2
 		41.318.077.02-2	Vite Dynamic M1.8 L7.7mm 25N.cm	
		41.318.111.01-2	Vite Dynamic M1.8 L11.1mm 25N.cm	
  		43.618.201.01-2	Cacciavite Dynamic L18mm 30°	
		43.624.201.01-2	Cacciavite Dynamic L24mm 30°	
		43.632.201.01-2	Cacciavite Dynamic L32mm 30°	
		49.413.000.01-2	Transfert vite Dynamic L22mm	

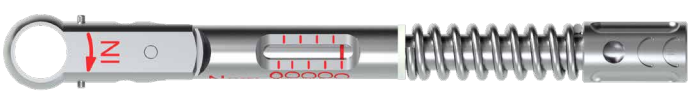Accessori per avvitatura manuale alla coppia di 25 N.cm	Adattatore manuale DEMA-4	 
	Chiave dinamometrica DCDYN-2*	

*La chiave dinamometrica **DCDYN-2** è un dispositivo medico di classe I prodotto da **Josef Ganter Feinmechanik GmbH**.

Dispositivo medico **marchiato CE e prodotto da Talladium España S.L. Consultare il manuale d'istruzioni **del produttore** prima dell'uso.

I manuali di istruzioni sono dematerializzati. L'etichetta del dispositivo riporta inoltre un QR code e un link URL. I manuali vengono comunque forniti su richiesta e senza costi aggiuntivi entro un massimo di 7 giorni. La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo seguente: quality@globald.com.