



In-Kone® FICHA TÉCNICA

Capítulo 4: Prótesis unitaria

Sección 4: TiBase ASC Dynamic In-Kone® ST



Z.I. de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais
Tel.: +33 (0)4 78 56 97 00 – Fax: +33 (0)4 78 56 01 63
www.globald.com

Este documento está destinado a los cirujanos dentistas y los laboratorios de prótesis. En él se describe paso a paso la realización de una restauración unitaria sobre un implante de la gama In-Kone® ST mediante una placa base de ajuste de eje.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LAS TIBASE CON ORIFICIOS DE ACCESO ANGULADO

Esta placa base se adapta a las restauraciones anteriores unitarias que requieren un ajuste de eje angulado. No utilizar las versiones no indexadas en puentes directos sobre implantes.

Con un diámetro de 4 mm, las posiciones afectadas son los sectores **premaxilar** (de la 5 a la 5) y sínfisario. Las demás posiciones están contraindicadas. La placa base de titanio es **específica** y permite reorientar el orificio de acceso del tornillo con respecto al eje del implante en un **ángulo máximo de entre 20° y 40°**, según la configuración (ver las figuras destacadas) y de forma tridimensional. Se trata de una herramienta de optimización protésica.

En caso de uso indebido o de incumplimiento de las instrucciones de uso, pueden surgir complicaciones.

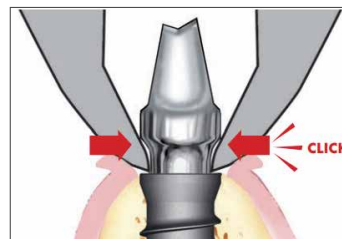
PRECAUCIONES DE USO + EXTRACCIÓN

GENERALES

- Utilizar el destornillador Dynamic contraangular con el adaptador adecuado. Se dispone de un portatornillos para facilitar la colocación de los tornillos no cautivos en la cavidad bucal.
- La utilización de un orificio de atornillado angulado impedirá el uso del extractor de falsos muñones durante su desmontaje, por lo que se utilizará un davier para retirar la corona.
- Hacer pruebas sin **apretar el mecanismo**.
- Para la impresión, deben utilizarse los transfers y similares, tanto clásicos como digitales, de Global D.

EN LA CLÍNICA DENTAL

- El par de apriete habitual de la prótesis es de 25 N·cm.**
- Asegurarse de que el destornillador esté bien encajado en el tornillo antes de apretarlo con el par de apriete adecuado, para que no se dañe la ranura del tornillo.
- Para facilitar la extracción de la corona atornillada, desatornillar el tornillo y asegurarse de que ya no esté encajado en el implante cuando esté cautivo; a continuación, utilizar preferiblemente un davier, tal y como se indica en la imagen.



En caso de dificultades, póngase en contacto con Global D.

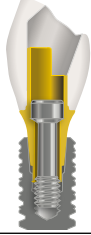
- En caso de colocación estética inmediata, ajustar el apriete del tornillo en consecuencia.**

EN EL LABORATORIO

- Utilizar un tornillo distinto al tornillo de uso.
- Pegado fuera de la boca en el laboratorio; en caso de **tornillo cautivo**, recordar insertarlo en la TiBase antes de pegar la corona.
- Si se solicita, se puede obtener un complemento específico para la biblioteca, junto con su guía de inicio rápido correspondiente.
- Recomendación de limpieza y esterilización de acuerdo con las directrices vigentes para las prótesis procedentes de laboratorios de prótesis dentales.

CARACTERÍSTICAS:

- 1ª SOLUCIÓN:** CON UNA CAVIDAD QUE PERMITE EL PASO DEL TORNILLO

Ángulo máximo	40°	25°	SISTEMA ESTÁNDAR
			
Altura periodontal GH	1 mm	2 mm	
Ref. TiBase indexada	31.310.152.01-2	31.310.152.02-2	
Ref. TiBase no indexada	31.320.152.01-2	31.320.152.02-2	
Ref. Tornillo*	41.318.077.02-2	41.318.077.02-2	



* se suministra en envase individual junto con la TiBase

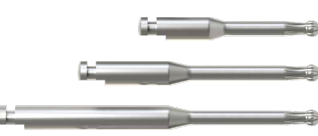
● 2ª SOLUCIÓN: CON TORNILLO CAUTIVO

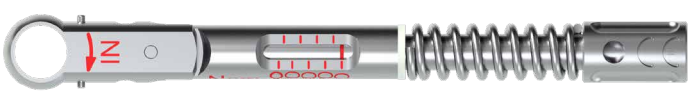
Ángulo máximo	25°	20°	25°	25°	SISTEMA DE TORNILLO CAUTIVO (CS)
 Tornillo que debe insertarse en la placa base antes del pegado					
Altura periodontal GH	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	
Ref. TiBase indexada	31.310.152.01-2	31.310.152.02-2	31.310.152.03-2	31.310.152.04-2	
Ref. TiBase no indexada	31.320.152.01-2	31.320.152.02-2	31.320.152.03-2	31.320.152.04-2	
Ref. Tornillo*	41.318.077.02-2	41.318.077.02-2	41.318.111.01-2	41.318.111.01-2	

* se suministra en envase individual junto con la TiBase

Solución con un paso del tornillo reducido a Ø2 mm, lo que supone una reducción de la cavidad de hasta un 32 % <=> Aumento del volumen de la prótesis

LISTA DE REFERENCIAS Y MATERIAL NECESARIO** (GH: ALTURA PERIODONTAL)

GAMA	GH Altura periodontal	Referencia artículo	Designación comercial ES	Ref. tornillo a suministrar con la TiBase
 indexada	1	31.310.152.01-2	TiBase Dynamic XNP indexada G1 Comp.0152	41.318.077.02-2
	2	31.310.152.02-2	TiBase Dynamic XNP indexada G2 Comp.0152	41.318.077.02-2
	3	31.310.152.03-2	TiBase Dynamic XNP indexada G3 Comp.0152	41.318.111.01-2
	4	31.310.152.04-2	TiBase Dynamic XNP indexada G4 Comp.0152	41.318.111.01-2
 no indexada	1	31.320.152.01-2	TiBase Dynamic XNP no indexada G1 Comp.0152	41.318.077.02-2
	2	31.320.152.02-2	TiBase Dynamic XNP no indexada G2 Comp.0152	41.318.077.02-2
	3	31.320.152.03-2	TiBase Dynamic XNP no indexada G3 Comp.0152	41.318.111.01-2
	4	31.320.152.04-2	TiBase Dynamic XNP no indexada G4 Comp.0152	41.318.111.01-2
		41.318.077.02-2	Tornillo Dynamic M1,8 L7,7mm 25N.cm	
		41.318.111.01-2	Tornillo Dynamic M1,8 L11,1mm 25N.cm	
		43.618.201.01-2	Destornillador Dynamic L18mm 30°	
		43.624.201.01-2	Destornillador Dynamic L24mm 30°	
		43.632.201.01-2	Destornillador Dynamic L32mm 30°	
		49.413.000.01-2	Transfer de tornillo Dynamic L22mm	

Accesorios para atornillado manual con un par de 25 N·cm	Adaptador manual DEMA-4	
	Llave dinamométrica DCDYN-2*	

* La llave dinamométrica DCDYN-2 es un producto sanitario de clase I fabricado por Josef Ganter Feinmechanik GmbH.
** Producto sanitario con marcado CE y fabricado por Talladium España S.L. Antes de utilizar un producto, consulte el manual de instrucciones del fabricante correspondiente.
Las instrucciones están en formato digital. Además, en la etiqueta del producto hay un código QR y una URL. No obstante, los manuales pueden conseguirse previa solicitud y sin gastos adicionales en un plazo de 7 días. La solicitud debe enviarse a la siguiente dirección: quality@globald.com