


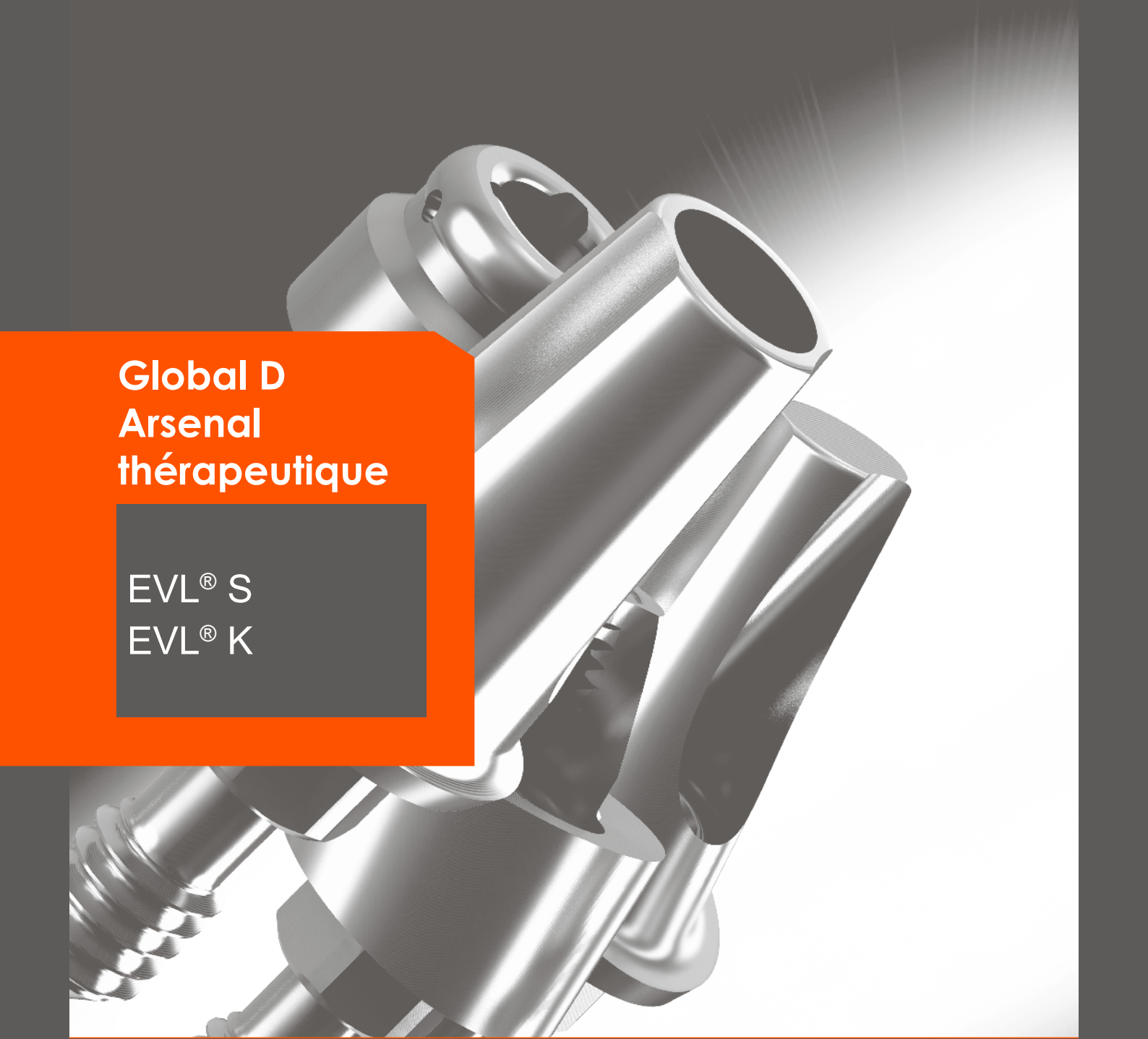

Global D
Arsenal
thérapeutique

EVL® S
EVL® K

Implants à épaulement supra-crestal

La prothèse





Partenaire de vos chirurgies

Global D est une société française, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à disposition de **dispositifs médicaux de qualité** destinés à la chirurgie maxillo-faciale, pré-implantaire, orthodontique et à l'implantologie dentaire.

Passionnés par notre activité, nous favorisons les **relations de proximité** avec nos clients. Au-delà des produits que nous développons en étroite concertation avec des chirurgiens expérimentés, nous accompagnons l'ensemble de nos utilisateurs dans le perfectionnement de leur exercice. C'est dans cet esprit que nous offrons à nos clients la possibilité d'un **partage de connaissances** par la mise en place d'un important réseau de confrères, d'un large éventail d'événements, de rencontres et de formations.

Nous mettons également tout en œuvre pour nous assurer du **professionnalisme** et de la **compétence de nos équipes**, en charge du conseil et de la prestation de service auprès des chirurgiens utilisateurs de nos produits.

Forts de la remarquable synergie entre nos domaines d'activité, nous revendiquons une importante valeur ajoutée en termes d'expertise en matière de chirurgie osseuse dédiée à l'harmonie du visage et l'esthétique du sourire.



Arsenal thérapeutique Global D

Implants à épaulement supra-crestal

La prothèse

Les gammes de prothèse p.4

Les grands principes	p.5
----------------------	-----

Serrage des composants prothétiques	p.5
-------------------------------------	-----

Gamme des composants

Vis de cicatrisation	p.7
----------------------	-----

Prise d'empreinte	p.8
-------------------	-----

Analogue et prothèse provisoire	p.9
---------------------------------	-----

Prothèse scellée	p.10
------------------	------

Prothèse vissée unitaire	p.14
--------------------------	------

Prothèse vissée plurale	p.16
-------------------------	------

Prothèse amovible	p.20
-------------------	------

Informations techniques p.26

La connexion prothétique au cœur du dispositif implantable	p.26
--	------

Références p.28

Les produits présentés sont des Dispositifs Médicaux de classe I, IIa et IIb et à ce titre sont porteurs du marquage CE (CE0459) conformément à la Directive 93/42/CEE.

Ces dispositifs ne sont pas soumis au régime de remboursement de la Sécurité Sociale.

Il est possible que les dispositifs médicaux présentés ne soient pas disponibles à la vente dans tous les pays. Pour tout complément d'information, veuillez contacter le service commercial de Global D.

Merci de consulter la notice d'instructions avant toute utilisation. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service commercial de Global D.

Les notices d'instructions sont dématérialisées. Ainsi un QR code et un lien URL sont présents sur l'étiquette du dispositif. Les notices sont néanmoins disponibles sur simple demande et sans frais supplémentaire sous un délai de 7 jours. La demande doit être effectuée à l'adresse suivante : quality@globald.com.

A l'attention des utilisateurs :

Merci de respecter les notices d'utilisation jointes avec le dispositif. La société Global D se dégage de toute responsabilité en cas de non respect de ses recommandations.

L'utilisation du système de restaurations sur implants Global D est réservée aux praticiens préalablement formés à la chirurgie implantaire ainsi qu'à la restauration prothétique sur implants.

La fonctionnalité du système n'est garantie qu'à la condition que l'ensemble des pièces fabriquées soient d'origine. Toute « copie » non certifiée en provenance d'un autre fabricant que Global D ne donne droit à aucune revendication en cas de dysfonctionnement du système.

Le bon état des composants neufs ou réutilisés doit être scrupuleusement vérifié par l'utilisateur avant la pose en bouche.

L'utilisateur est responsable de vérifier le bon fonctionnement de l'ancillaire avant chaque chirurgie. Il est de sa responsabilité d'entretenir et de stériliser son matériel conformément aux usages et réglementations en vigueur. Il est également de sa responsabilité de remplacer les instruments réutilisables jugés défectueux ou inaptes à une utilisation correcte du matériel.

La gamme de prothèse : les grands principes

Implants avec col lisse supra-crestal


EVL[®]S & EVL[®]K

Les implants EVL[®], le plus souvent utilisés en 1 temps chirurgical, simplifient le traitement implantaire et permettent de gagner du temps et d'être encore plus efficace.

Le col lisse supra-osseux des implants EVL[®] S et EVL[®] K munis d'une connexion type hexagone interne favorise la formation et la préservation d'un bandeau muqueux et facilite ainsi les manipulations en bouche pendant les phases de restauration prothétique.

Correspondances Implants et Gammes Prothétiques

Gamme de prothèse EVL[®]S & EVL[®]K

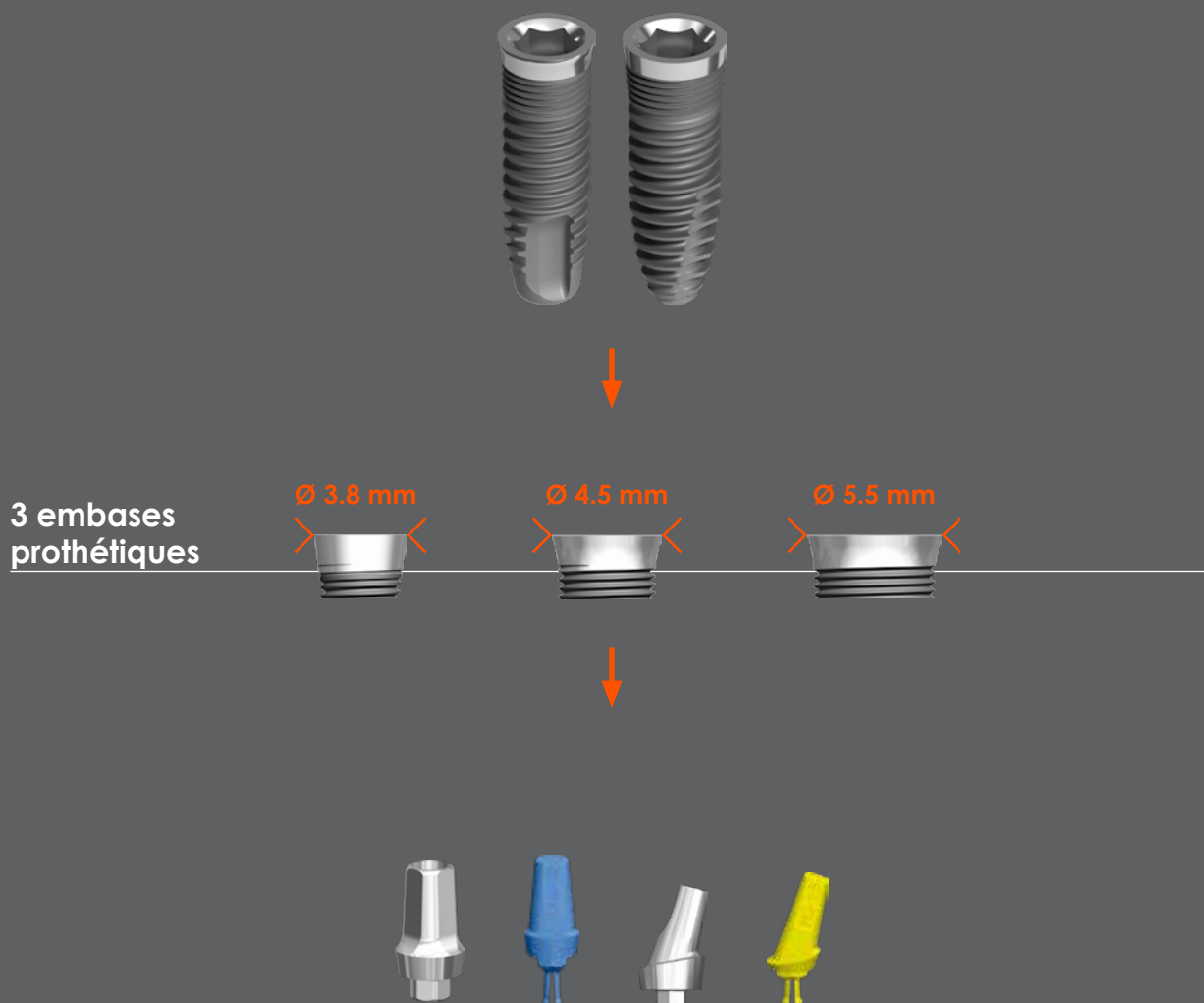


NOTE : images à titre illustratif




Gamme prothétique commune



Code couleur
3 diamètres d'implants

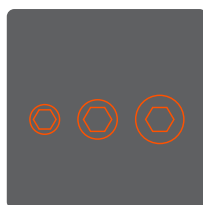

3 diamètres
d'embases prothétiques
Ø 3.8 / 4.5 / 5.5

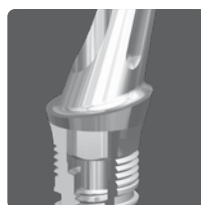

Connexion
hexagonale interne



3 diamètres de piliers
MULTI E
NR / ST / WD



Serrage des composants prothétiques

	Faux-moignon provisoire titane	Faux-moignon droit et angulé 8°, 15° et 23°	Faux-moignon transverse	Pilier MULTI	Pilier MULTI angulé	Locator®	Attachement boule	Embase	Vis de prothèse
Références	DTUBEVL DTUBEVLNI	DFMTA	DFMTR	DMULTIE	DMUA	DLOCEVL*	DBALL PLUS	DEVEVL	
Indication									
Unitaire	■	■	■					■	
Plurale	■	■	■	■	■	■	■		
Restauration									
Fixe scellée		■	■						
Fixe vissée	■			■	■			■	■
Amovible				■	■	■	■		■
Couple	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm	35 N.cm

*Dispositif Médical fabriqué et marqué CE par ZEST ANCHORS LLC (CE 0086). Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation.



Gamme des composants

Les vis de cicatrisation

Préparation du berceau prothétique



La vis de cicatrisation est un composant essentiel de la phase de restauration du système implantaire EVL® puisqu'elle signe le profil d'émergence prothétique de la future dent.

Le profil des vis de cicatrisation EVL® est inspiré directement de l'anneau esthétique*. L'évasement permet de préparer l'entrée du berceau prothétique et de conformer un accès ajusté et sans tension tissulaire au profil des composants définitifs.

(* système original unique éprouvé de préparation de la muqueuse de l'implant EVL®)

Système EVL® S et EVL® K

Vis de cicatrisation optionnelles  Couple de serrage : 10 N.cm

Implant H	Ø 3.3 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm
0.4 mm	 DVCEVL3.3-0	 DVCEVL4-0	 DVCEVL5-0
1.8 mm	 DVCEVL3.3-STD	 DVCEVL4-STD	 DVCEVL5-STD
3.0 mm	 DVCEVL3.3-3	 DVCEVL4-3	 DVCEVL5-3
4.5 mm	 DVCEVL3.3-4.5	 DVCEVL4-4.5	 DVCEVL5-4.5

Chaque implant est fourni avec une vis de cicatrisation d'une hauteur de 1.8 mm, d'autres vis sont disponibles de façon optionnelles. Ces dernières sont livrées stériles. Les vis de cicatrisation hauteur 0.4mm correspondent à des vis de couverture.

Clés de vissage



Prise d'empreinte direct implant

Transfert

Il existe deux types de transferts, les Pick-Up pour la méthode porte-empreinte à ciel ouvert et les Pop-Up pour la technique porte-empreinte à ciel fermé ou de repositionnement. Les transferts Pop-Up existent en deux hauteurs pour s'adapter aux différentes épaisseurs de tissus mous.

	Transfert Pick-Up			Transfert Pop-Up			Transfert Pop-Up Long		
									
Code couleur									
Diamètre de l'implant	Ø3.3 mm	Ø4 mm	Ø5 mm	Ø3.3 mm	Ø4 mm	Ø5 mm	Ø3.3 mm	Ø4 mm	Ø5 mm
Transfert direct implant	DTREVL3.3M	DTREVL4SA	DTREVL5SA	DTREVLPOP3.3	DTREVLPOP4	DTREVLPOP5	DTREVLPOPL3.3	DTREVLPOPL4	DTREVLPOPL5
Hauteur totale avec la vis	13 mm			7.4 mm			9.7 mm	10.1 mm	
Vis seule	DVTRL3.3M	DVTRL4ET5SA		DVTRPOP3.3	DVTRPOP4ET5			DVTRPOPL4ET5	

 **Vissage manuel (ou entre 5 et 10 N.cm maximum)**

Transferts numériques 2 en 1

Les transferts numériques Global D sont utilisables avec la majorité des caméras intrabuccales pour la prise d'empreinte optique en bouche et les scanners de table pour la numérisation des modèles en plâtre au laboratoire.

Ils sont en titane anodisé et peuvent être généralement utilisés sans poudrage. Véritablement universels, les transferts numériques s'utilisent pour l'ensemble de nos solutions CAD/CAM. Les interfaces sont intégrées dans les principaux logiciels de CAO référents. Les bibliothèques sont disponibles sur simple demande.

Ø Implant	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
	DTNVEVL3.3	DTNVEVL4	DTNVEVL5

 **Vissage manuel (ou entre 5 et 10 N.cm maximum)**

Clés de vissage



DCM1.2HC



DCM1.2H



DCM1.2HL

Analogues

Ø Implant	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
Analogue	 DDIEVL3.3	 DDIEVL4SA	 DDIEVL5SA

Note : Les analogues d'implants EVL® sont utilisables sur modèles imprimés.

Faux-moignons provisoires

Les tubes sont des gaines titane indéchassées pour réaliser de la prothèse unitaire ou non indexées pour de la prothèse plurale direct implant (si les conditions cliniques le permettent). Les repères striés permettent une coupe facilitée tous les millimètres (dans la limite d'une hauteur coronaire suffisante).

Ø Implant	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 TUB indexé	DTUBEVL3.3	DTUBEVL4	DTUBEVL5
 TUB non indexé	DTUBEVL3.3NI	DTUBEVL4NI	DTUBEVL5NI
Hauteur coronaire	9.3 mm		


 Couple de serrage : 35 N.cm

Pièce secondaire au TUB

Il existe une gaine calcifiable qui s'adapte sur les tubes. Celle-ci est compatible à tous les diamètres d'implants EVL®.

Ø Implant	Ø 3.3 mm / 4 mm / 5 mm
	DTUBGLAB

Prothèse scellée

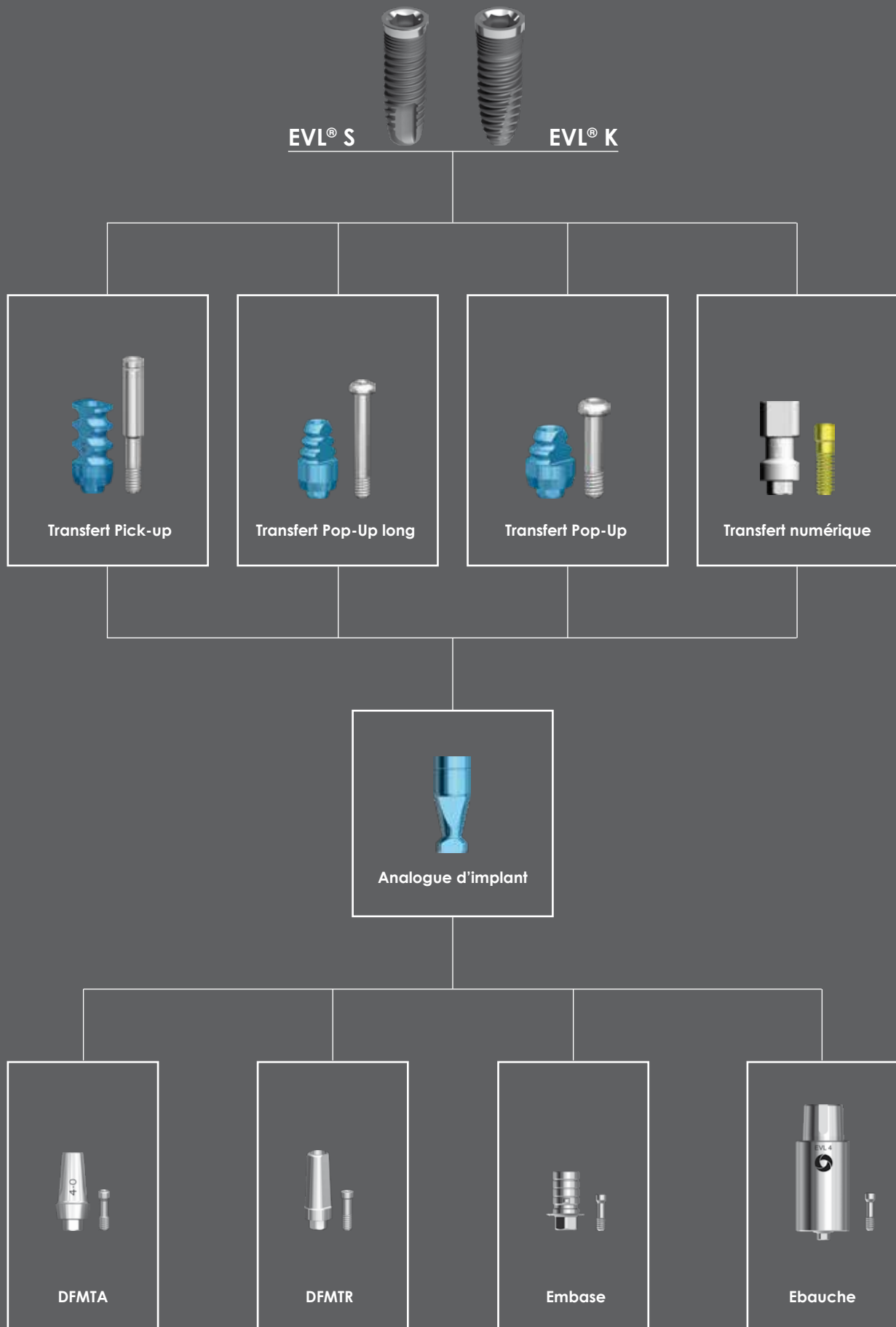

Prothèse scellée

Faux-moignons esthétiques : FMTA

Les faux-moignons esthétiques droits et angulés FMTA sont conçus pour la plupart des indications de prothèses scellées. La gamme FMTA propose 4 angulations différentes ainsi que 2 hauteurs parodontales. Pour aider au choix du pilier le plus adapté, la gamme est associée à un kit d'essai constitué de répliques de faux-moignons en plastique qui se clippent dans les répliques d'implants sur les modèles. Voir le descriptif du kit page suivante. La hauteur coronaire des FMTA est de 7 mm retouchable sur 3 mm.

	Hauteur parodontale	■ Ø 3.3 mm	■ Ø 4 mm	■ Ø 5 mm
 FMTA Droit	0	DFMTA3.3H0-00	DFMTA4H0-00	DFMTA5H0-00
	2	DFMTA3.3H2-00	DFMTA4H2-00	DFMTA5H2-00
 FMTA Angulé 8°	0	DFMTA3.3H0-8	DFMTA4H0-8	DFMTA5H0-8
	2	DFMTA3.3H2-8	DFMTA4H2-8	DFMTA5H2-8
 FMTA Angulé 15°	0	DFMTA3.3H0-15	DFMTA4H0-15	DFMTA5H0-15
	2	DFMTA3.3H2-15	DFMTA4H2-15	DFMTA5H2-15
 FMTA Angulé 23°	0	DFMTA3.3H0-23	DFMTA4H0-23	DFMTA5H0-23
	2	DFMTA3.3H2-23	DFMTA4H2-23	DFMTA5H2-23
Hauteur coronaire		7 mm		

↻ Couple de serrage : 35 N.cm

Faux-moignons standard : FMTR

	■ Ø 3.3 mm	■ Ø 4 mm	■ Ø 5 mm
 FMTR	DFMTR3.3M	DFMTR4SA	DFMTR5SA
Hauteur coronaire		11 mm	

↻ Couple de serrage : 35 N.cm

Clés de vissage



DCM1.2HC



DCM1.2H



DCM1.2HL

Kit d'essai FMTA

Le kit d'essai FMTA est une aide indispensable tant sur le choix de l'angulation que sur le choix de la hauteur gingivale. Il se compose de 2 moignons d'essai par référence de faux-moignon FMTA et intègre le code couleur selon les diamètres des implants. Ce kit porte la référence DKITFMTAESSAI. Les faux-moignons d'essai sont disponibles de manière indépendante par lot de 2. Vous trouverez les références sur le tableau ci-dessous.

	Hauteur parodontale	■ Ø 3.3 mm	■ Ø 4 mm	■ Ø 5 mm
 Droit	0	DFMTA3.3H0-00ESSAI	DFMTA4H0-00ESSAI	DFMTA5H0-00ESSAI
	2	DFMTA3.3H2-00ESSAI	DFMTA4H2-00ESSAI	DFMTA5H2-00ESSAI
 Angulé 8°	0	DFMTA3.3H0-08ESSAI	DFMTA4H0-08ESSAI	DFMTA5H0-08ESSAI
	2	DFMTA3.3H2-08ESSAI	DFMTA4H2-08ESSAI	DFMTA5H2-08ESSAI
 Angulé 15°	0	DFMTA3.3H0-15ESSAI	DFMTA4H0-15ESSAI	DFMTA5H0-15ESSAI
	2	DFMTA3.3H2-15ESSAI	DFMTA4H2-15ESSAI	DFMTA5H2-15ESSAI
 Angulé 23°	0	DFMTA3.3H0-23ESSAI	DFMTA4H0-23ESSAI	DFMTA5H0-23ESSAI
	2	DFMTA3.3H2-23ESSAI	DFMTA4H2-23ESSAI	DFMTA5H2-23ESSAI



REF : DKITFMTAESSAI

Embases

Les embases en titane Global D sont conçues pour permettre la fabrication de faux-moignons personnalisés en zircone, la partie personnalisée est rapportée sur l'embase par collage.

Ces embases peuvent être également utilisées par le laboratoire pour la réalisation de prothèses en technique conventionnelle ou numérique puis rapportées ensuite par collage sur l'embase.

Les embases unitaires ont la possibilité d'être ajustées de 1 à 2 mm en hauteur.

	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Embase	DEVEVL3.3	DEVEVL4	DEVEVL5

 Couple de serrage : 35 N.cm

Clés de vissage



Ebauches

Blocs titane Global D en version originale

Conçues et fabriquées par nos soins et garanties de nos connectiques, les ébauches (Pre-milled) Global D sont compatibles avec le **montage breveté S3DEL*** et le logiciel de FAO **WorkNC Dental**. Elles permettent la réalisation de piliers sur mesure en titane par le laboratoire avec la garantie d'une connexion bénéficiant d'une précision d'usinage industrielle.

* liste de machines disponible sur simple demande

	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Ebauche	DLABPMVEVL3.3	DLABPMVEVL4	DLABPMVEVL5



 Couple de serrage : 35 N.cm

Clés de vissage





Embases

Les embases en titane Global D sont conçues pour permettre la fabrication de faux-moignons personnalisés en zircone, la partie personnalisée est rapportée sur l'embase par collage.

Ces embases peuvent être également utilisées par le laboratoire pour la réalisation de prothèses en technique conventionnelle ou numérique puis rapportées ensuite par collage sur l'embase.

Les embases unitaires ont la possibilité d'être ajustées de 1 à 2 mm en hauteur.

	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
	DEVEVL3.3	DEVEVL4	DEVEVL5

↻ Couple de serrage : 35 N.cm

Clés de vissage



DCM1.2HC



DCM1.2H



DCM1.2HL





Piliers MULTI

Indications

- Bridge vissé sur plusieurs implants EVL®
- Prothèse amovible sur barre de jonction

	Hauteur parodontale	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Pilier MULTI E	0	DMULTIE3.3-0PACK*	DMULTIE4-0	DMULTIE5-0
	2	DMULTIE3.3-2	DMULTIE4-2	DMULTIE5-2
	4	DMULTIE3.3-4	DMULTIE4-4	DMULTIE5-4

🔧 Couple de serrage : 35 N.cm

* Les piliers MULTI E 3.3 H0 bénéficient d'un accastillage spécifique, de fait la référence DMULTIE3.3-0PACK comprend le pilier avec une gaine calcinable transfert d'empreinte avec la vis guide et une vis de prothèse.

Clés de vissage



DCPCM



DCPMM



DCPLM


Accastillage spécifique au Pilier MULTI E 3.3 H0

	 Ø 3.3 mm
 Gaine titane	DTUBMULTINR3.3-0
 Vis de transfert	DGTMINIVIS

Compatibilité des systèmes prothétiques

Diamètre piliers MULTI E	Plateforme	Diamètre de la prothèse
 Ø3.3	NR	4,3 mm
 Ø4	ST	5 mm
 Ø5	WD	6 mm

Parties secondaires

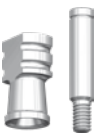	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Transfert Pick-Up	DTRMUV3.3	DTRMUV4	DTRMUV5
 Transfert numérique	DTNMUNR	DTNMUST	DTNMUWD
 Analogue de pilier Numérique	DMULTIDIE3.3N	DMULTIDIE4N	DMULTIDIE5N
 Coiffe de cicatrisation	DCC3.3EVL	DCC4EVL	DCC5EVL
 Gaine titane (TUB)	DTUBMULTINR	DTUBMULTIST	DTUBMULTIWD
 Gaine calcinable pour TUB	DTUBGLAB	DTUBGLAB	DTUBGLAB
 Gaine calcinable	DMULTILAB3.3	DMULTILAB4	DMULTILAB5
 Gaine calcinable transfert	DGTMU3.3	DGTMU4	DGTMU5
 Embase	DEVMULTINR	DEVMULTIST	DEVMULTIWD

Piliers MUA

Indications

- Bridge vissé sur plusieurs implants EVL®
- Prothèse amovible sur barre de jonction

	Hauteur parodontale	Angulation	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Pilier MUA	2/2.5	18°	DMUA3.32ST18	DMUA4SA2.5ST18	DMUA5SA2.5WD18
	3/3.5	18°	DMUA3.33ST18	DMUA4SA3.5ST18	DMUA5SA3.5WD18
	2.5	30°		DMUA4SA2.5ST30	DMUA5SA2.5WD30
	3.5	30°		DMUA4SA3.5ST30	DMUA5SA3.5WD30

↻ Couple de serrage : 35 N.cm

Parties secondaires

	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Transfert Pick-Up	DMUATRST	DMUATRST	DMUATRWD
 Gaine calcinable transfert	DMUAGTRST	DMUAGTRST	DMUAGTRWD
 Transfert numérique	DTNMUAST	DTNMUAST	DTNMUAST
 Analogue de pilier numérique	DMUADIESTN	DMUADIESTN	DMUADIESTN
 Coiffe de cicatrisation	DMUACOFFEST	DMUACOFFEST	DMUACOFFEWD
 Gaine titane (TUB)	DTUBMUAST	DTUBMUAST	DTUBMUAWD
 Gaine calcinable pour TUB	DTUBGLAB	DTUBGLAB	DTUBGLAB
 Embase	DEVMUAST	DEVMUAST	DEVMUAST

Clés de vissage



DCM1.2HC



DCM1.2H




DCM1.2HL



DPM1.6

Préhenseur

Prothèse amovible

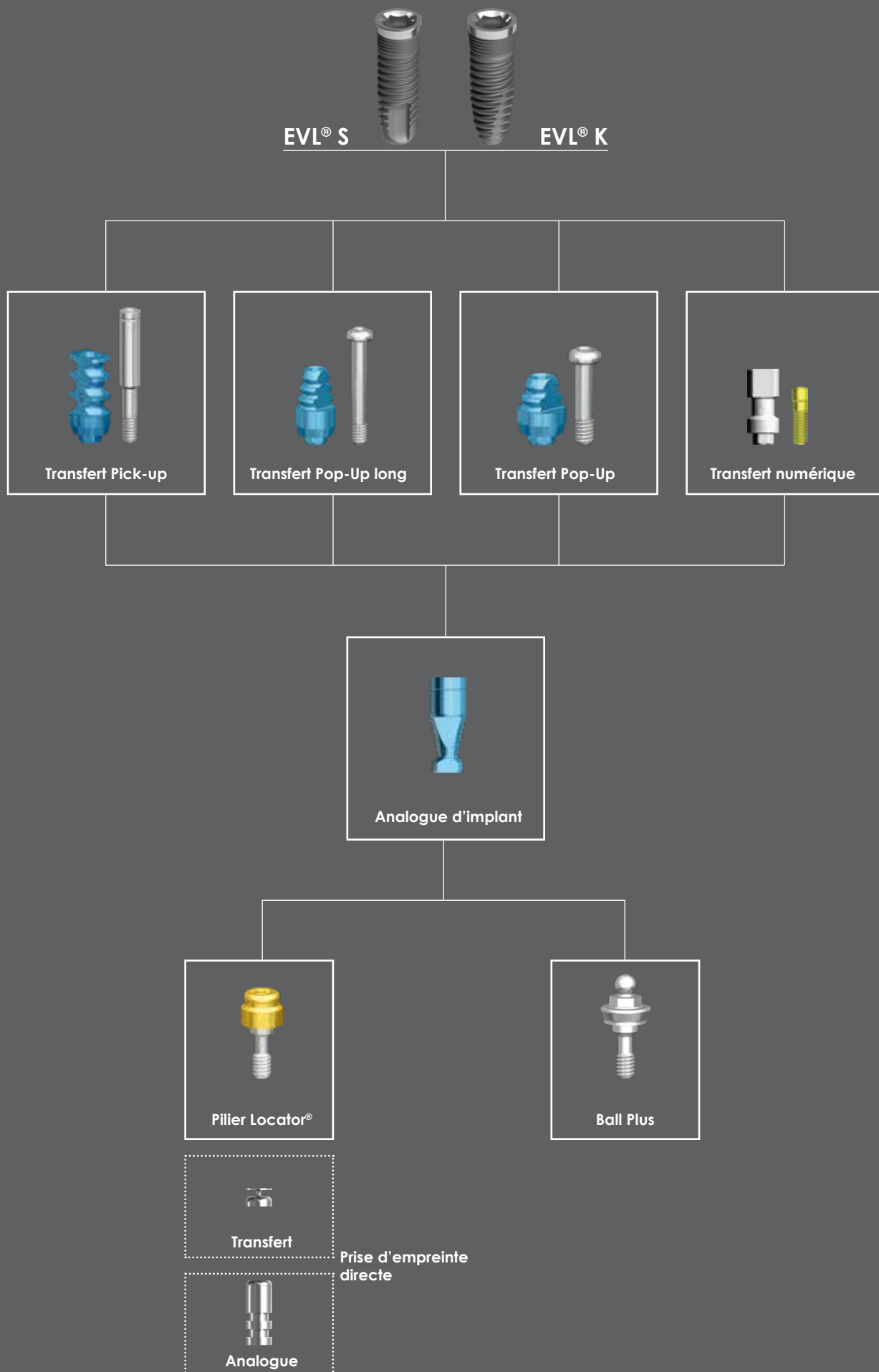

Piliers LOCATOR®

La conception du pilier Locator® permet la prise d'empreinte sur les piliers vissés. Le laboratoire travaille sur des répliques de l'attachement ce qui permet de relier le boîtier de rétention lors de la polymérisation de la prothèse. Son auto-alignement facilite la prise d'empreinte ainsi que la mise en place de la prothèse même avec des implants ayant une divergence allant jusqu'à 40°.

Les inserts interchangeables sont disponibles en diverses forces de rétention, afin d'adapter le maintien de la prothèse aux besoins du patient. Pour les implants de diamètre 5 mm, vous pouvez utiliser des piliers Locator identiques à ceux des implants de diamètre 4 mm.

	Hauteur parodontale	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm
 Pilier Locator®	2	DLOCEVL3.3-2*	DLOCEVL4-2*
	4	DLOCEVL3.3-4*	DLOCEVL4-4*

 Couple de serrage : 35 N.cm

Parties secondaires

Couple de serrage : 35 N.cm		Références	
Parties secondaires			
Divergence maximum de 20°	 Transfert d'empreinte	DLOCTransfert * (par 4)	
	 Analogue	DLOC4MMANALOG* (par 4)	
	 Partie femelle Locator (boîtier, rondelles d'espacement et rétentions)	DLOCATORPACK* (par 2)	
	 Sachet de 4 inserts noirs	DLOCJ0*	
	 Sachet de 4 inserts bleus 688 g	DLOCJ1*	
	 Sachet de 4 inserts rose 1361 g	DLOCJ2*	
	 Sachet de 4 inserts blancs 2268 g	DLOCJ3*	
	Divergence maximum de 40°	 Sachet de 4 inserts rouges 450 g	DLOCJ4*
		 Sachet de 4 inserts orange 910 g	DLOCJ6*
 Sachet de 4 inserts verts 1810 g		DLOCJ5*	

Clés de vissage



DLOCDRIVER15MM*



DLOCDRIVER21MM*

Clé de serrage du pilier Locator® manuelle
15 mm et 21 mm



DLOCDRIVERCA23MM*



DLOCDRIVERCA29MM*

Clé de serrage du pilier Locator® contre-angle
longueur 23 mm et 29 mm



Clé 3 en 1

DTLOCAT*

*Dispositif Médical fabriqué et marqué CE par ZEST ANCHORS LLC (CE 0086). Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation.

Attachements boules : BALL PLUS

Le pilier boule est utilisé pour l'ancrage de prothèses amovibles complètes ou partielles. Le pilier monobloc **BALL PLUS** est proposé de façon indépendante des parties femelles. Il est disponible en deux hauteurs de col transmuqueux pour chaque diamètre d'implant de la gamme EVL®.

	Hauteur parodontale	 Ø 3.3 mm	 Ø 4 mm	 Ø 5 mm
 Pilier BALL PLUS	1.7	DBALLPLUS3.3	DBALLPLUS4	DBALLPLUS5
	3.8	DBALLPLUS3.3L	DBALLPLUS4L	DBALLPLUS5L

 Couple de serrage : 35 N.cm

Parties secondaires

Les piliers BALL PLUS ont un diamètre de boule de 2.25 mm et sont donc compatibles avec les attachements de nombreuses marques dont l'attachement Dalbo® Plus, dont vous trouverez les références ci-dessous. Les attachements Dalbo® Plus elliptic associés aux piliers Ball Plus, peuvent compenser une divergence jusqu'à 24° au total, soit 12° maximum unitairement entre l'axe du boîtier et celui du pilier Ball Plus. Il est important de placer les boîtiers parallèles entre eux, perpendiculairement à l'axe d'insertion et de désinsertion de la prothèse.



Ensemble Dalbo® Plus elliptic* :
boîtier
 + insert standard
 + rondelle d'espacement

DDBPELPSTD055890*

	Insert	Référence	usure des boules suivant le type d'insert
	Standard de rechange	DDBPINERSTD*	2.26 à 2.23
	Reprise soft	DDBPINERTRSOFT050*	2.23 à 2.20
	Reprise	DDBPINERTR055687*	2.20 à 2.17

Clés de vissage



DCPCM



DCPMM



DCPLM



DDBPCVACT43048*

Clé d'activation pour attachements

*Dispositif Médical fabriqué et marqué CE par Cendres+Métaux SA (CE 1250). Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation.

Pièces de rechange

Vis de prothèse et de transfert

Nos vis sont disponibles de façon indépendante.

MULTI / TUB / EVL® C

	Désignation	Référence
	Prothèse MULTI 3.3-0 (SP) longueur 4.4mm/TUB Embases des piliers MULTI	DMINIVIS
	Prothèse MULTI/TUB	DVMU1.2T
	Transfert du MULTI E 3.3-0 PACK/TUB	DGTMINIVIS
	Transfert MULTI/TUB	DGTVIS
	Transfert longue MULTI/TUB	DGTVISL

FMTR / GEVL / GEVLLAB

Vis de prothèse pour pilier

	Implant	Référence
	Ø3.3	DVPEG3.3
	Ø4 et Ø5	DVPEG4-5SA

TREVL POP / TREVL POP L

	Implant	Désignation	Référence
	Ø3.3	Transfert pop-up court	DVTRPOP3.3
	Ø4, Ø5 (court) et Ø3,3 (long)	Transfert pop-up court et long	DVTRPOP4 ET5
	Ø4 et Ø5	Transfert pop-up long	DVTRPOPL4ET5

MUA

	Désignation	Référence
	Transfert laboratoire	DGTVISM1.6
	Prothèse	DVMU1.2T M1.6

FMTA / TUB EVL / embase / ébauche

Vis de prothèse pour pilier

	Implant	Référence
	Ø3.3	DVISSCREWPLUS3.3
	Ø4 et Ø5	DVISSCREWPLUS4ET5

Vis de laboratoire

	Implant	Référence
	Ø3.3	DVISSCREWPLUS3.3XL
	Ø4 et Ø5	DVISSCREWPLUS4ET5

TREVL

Vis pour transfert PICK-UP

	Implant	Référence
	Ø3.3	DVTRL3.3M
	Ø4 et Ø5	DVTRL4ET5SA

DGEVL


Vis de transfert laboratoire pour gaine calcifiable DGEVL

	Implant	Référence
	Ø3.3	DVISTR 3.3
	Ø4 et Ø5	DVISTR4ET5

Instrumentation de prothèse

Trousse de prothèse complète

Global D met à disposition une trousse de prothèse complète qui comprend l'ensemble des instruments nécessaires pour réaliser de la prothèse sur des implants EVL®.

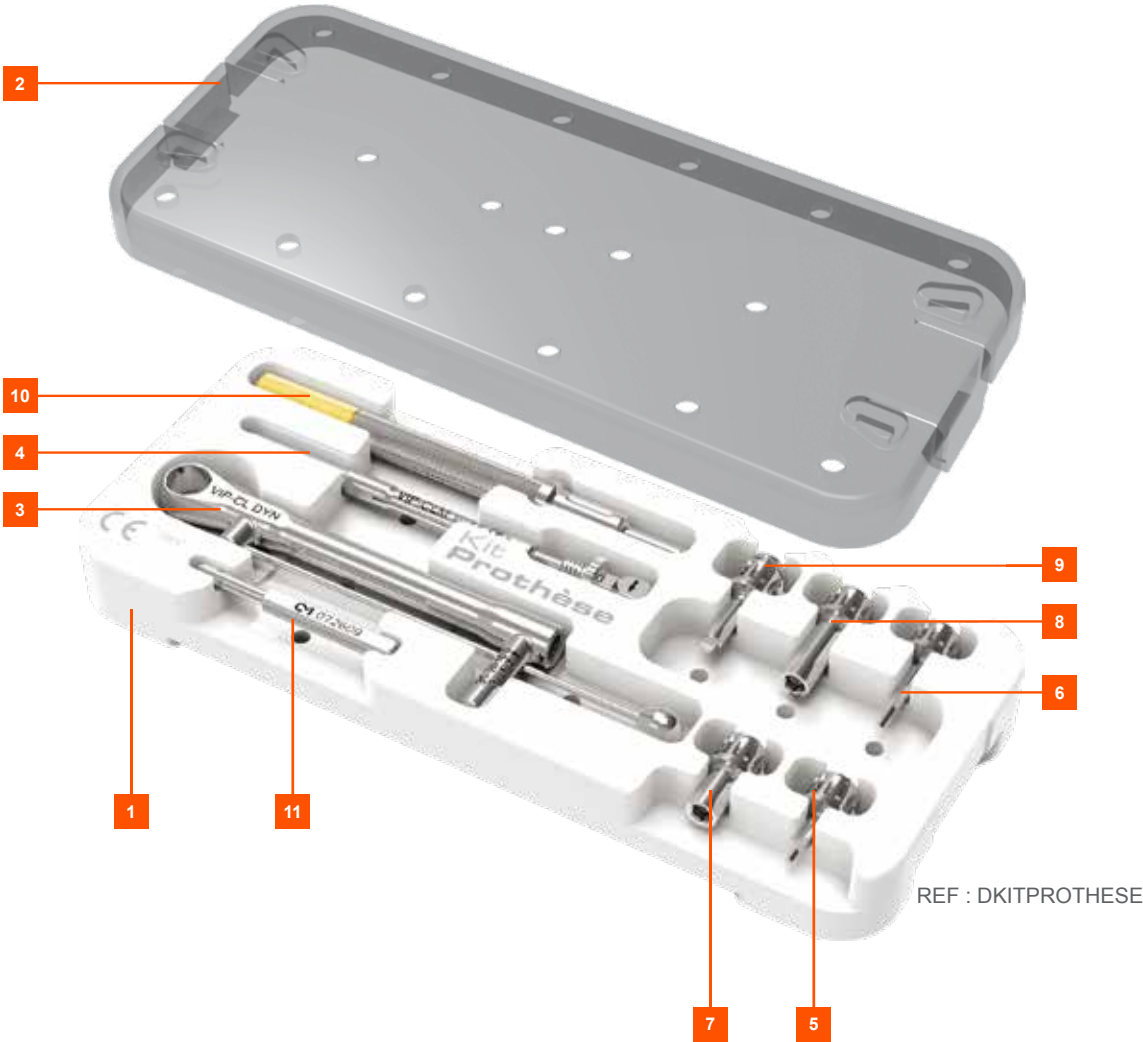

1	Boîte sans instruments et sans couvercle (base)	DBASEKITPROTHESE
2	Couvercle transparent cristal	DCOUCOVERCLEC1563
3	Module clé à cliquet dynamométrique	DVIP-CLDYN
4	Mécanisme interne pour module à cliquet ou dynamométrique	DVIP-CLM
5	Clé de 1.2 mm courte manuelle / cliquet	DCM1.2HC
6	Clé de 1.2 mm moyenne manuelle / cliquet	DCM1.2H
7	Clé de 3 mm courte manuelle / cliquet	DCPCM
8	Clé de 3 mm moyenne manuelle / cliquet	DCPMM
9	Clé de serrage du pilier Locator® long. 21 mm manuelle / cliquet	DLOCDRIVER21MM*
10	Instrument multifonctions Locator® en 3 parties	DTLOCAT*
11	Emplacement pour clé d'activation pour attachement Dalbo® Plus (optionnelle)	DDBPCVACT43048**

*Dispositif Médical fabriqué et marqué CE par ZEST ANCHORS LLC (CE 0086). Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation.

**La référence DDBPCVACT43048 est un dispositif fabriqué & marquée CE par Cendres+Métaux SA (CE 1250). Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation. Elle est livrée sur demande en dehors du Kit DKITPROTHESE.

Instrumentation optionnelle

Clés de 3 mm (vissage des piliers MULTI E / BALL)

	Clé préhenseur de 3 mm courte - contre-angle	DCPCA
	Clé préhenseur de 3 mm moyenne - contre-angle	DCPMA
	Clé préhenseur de 3 mm longue - contre-angle	DCPLA
	Clé préhenseur de 3 mm courte - Manuelle / cliquet	DCPCM
	Clé préhenseur de 3 mm moyenne - Manuelle / cliquet	DCPMM
	Clé préhenseur de 3 mm longue - Manuelle / cliquet	DCPLM

Clés de 1.2 mm (vissage des vis de cicatrisation / transfert / prothèse)

	Clé de 1.2 mm courte contre-angle	DCAB1.2HC
	Clé de 1.2 mm moyenne contre-angle	DCAB1.2H
	Clé de 1.2 mm longue contre-angle	DCAB1.2HL
	Clé de 1.2 mm courte manuelle / cliquet	DCM1.2HC
	Clé de 1.2 mm moyenne manuelle / cliquet	DCM1.2H
	Clé de 1.2 mm longue manuelle / cliquet	DCM1.2HL
		DVIP-CLDYNKIT
	Clé de serrage du pilier Locator® manuelle 15 mm	DLOCDRIVER15MM*
	Clé de serrage du pilier Locator® manuelle 21 mm	DLOCDRIVER21MM*
	Clé de serrage du pilier Locator® contre-angle longueur 23 mm	DLOCDRIVERCA23MM*
	Clé de serrage du pilier Locator® contre-angle longueur 29 mm	DLOCDRIVERCA29MM*
	Adaptateur manuel / cliquet pour instrument contre-angle	DEMA-4

Les instruments (hors clé à cliquet dynamométrique) sont représentés à leur taille réelle

*Dispositif Médical fabriqué et marqué CE par ZEST ANCHORS LLC (CE 0086). Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation.

La connexion prothétique au cœur du dispositif implantable

Résultats mécaniques

Sur le plan industriel, la résistance mécanique et le verrouillage de l'interface sont intimement liés à la précision d'ajustage entre les parties mâles et femelles ainsi qu'à la maîtrise des états de surface de l'un et l'autre.



Savoir-faire industriel et dispositifs médicaux

Conception, tests mécaniques, validation clinique, fabrication, contrôle, enregistrement, traçabilité, marquage CE, stockage, mise à disposition, suivi de mise sur le marché,...

Global D bénéficie d'un plateau technique exclusivement conçu et personnalisé pour la fabrication d'implants dentaires et l'accastillage prothétique.

Nos équipes de techniciens expérimentés sont spécifiquement formées à l'usinage de pièces médicales. La précision des conditions de coupe permet la maîtrise des états de surface au niveau de la connexion implantaire.

Les connexions sont soumises à un contrôle continu sévère directement sur les chaînes de production. Les lots sont ensuite confiés au service de contrôle qui valide à son tour les cotes critiques. Ce dernier dispose d'un plateau technique high-tech permettant de travailler avec une précision de l'ordre de ± 5 microns au niveau de la connexion (l'épaisseur d'un cheveu étant d'environ 70 microns en moyenne). Chaque contrôle est enregistré et conservé pendant la durée de vie du produit.



Global D, partenaire de votre réussite

EVL[®], près de 25 ans de recul clinique

Des concepteurs passionnés


Une équipe technique expérimentée

Un outil industriel dédié

Un assemblage testé

Des composants contrôlés

Traçabilité

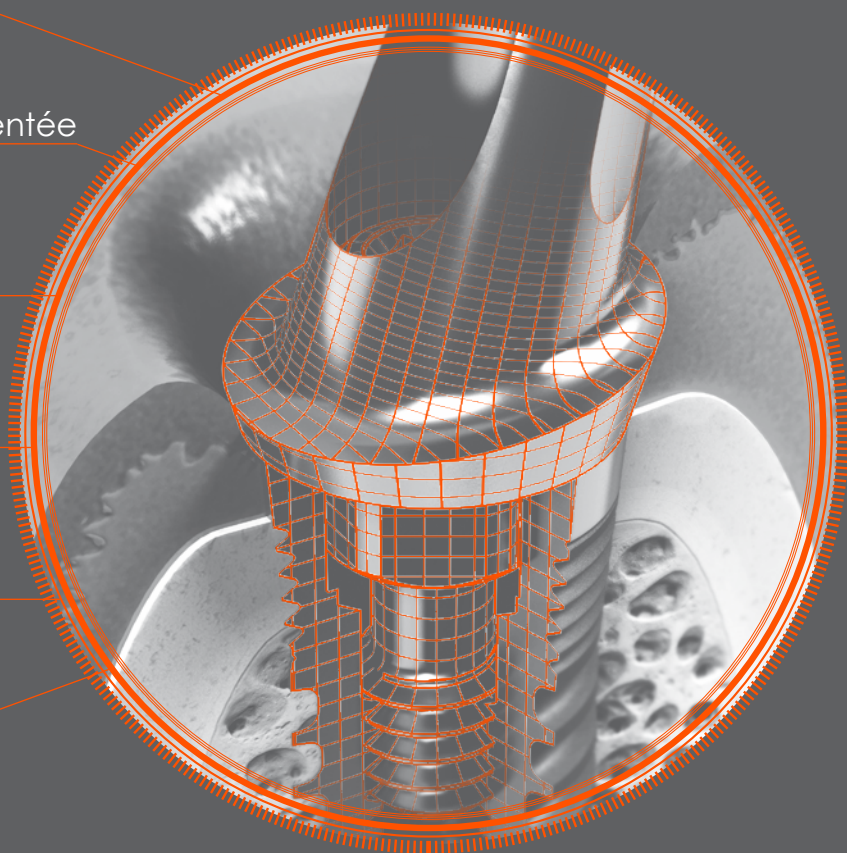

Références des composants

Vis de cicatrisation/couverture

DVCEVL3.3-0	EVL®	EVL 3.3 VIS DE COUVERTURE HAUT 0.4mm
DVCEVL3.3-3	EVL®	EVL 3.3 VIS DE COUVERTURE HAUT 3mm
DVCEVL3.3-4.5	EVL®	EVL 3.3 VIS DE COUVERTURE HAUT 4.5mm
DVCEVL3.3-STD	EVL®	EVL 3.3 STD VIS DE COUVERTURE HAUT 1.8mm
DVCEVL4-0	EVL®	EVL 4 VIS DE COUVERTURE HAUT 0.4mm
DVCEVL4-3	EVL®	EVL 4 VIS DE COUVERTURE HAUT 3mm
DVCEVL4-4.5	EVL®	EVL 4 VIS DE COUVERTURE HAUT 4.5mm
DVCEVL4-STD	EVL®	EVL 4 STD VIS DE COUVERTURE HAUT 1.8mm
DVCEVL5-0	EVL®	EVL 5 VIS DE COUVERTURE HAUT 0.4mm
DVCEVL5-3	EVL®	EVL 5 VIS DE COUVERTURE HAUT 3mm
DVCEVL5-4.5	EVL®	EVL 5 VIS DE COUVERTURE HAUT 4.5mm
DVCEVL5-STD	EVL®	EVL 5 STD VIS DE COUVERTURE HAUT 1.8mm

Prise d'empreinte

DTREVLPOP3.3	EVL®	TREVL POP 3,3 TRANSFERT POP UP Haut. 7.4 MM
DTREVLPOP4	EVL®	TREVL POP 4 TRANSFERT POP UP Haut. 7.4 MM
DTREVLPOP5	EVL®	TREVL POP 5 TRANSFERT POP UP Haut. 7.4 MM
DTREVLPOPL3.3	EVL®	TREVL POP L 3,3 TRANSFERT POP UP Haut. 9.7 MM
DTREVLPOPL4	EVL®	TREVL POP L 4 TRANSFERT POP UP Haut. 10.1 MM
DTREVLPOPL5	EVL®	TREVL POP L 5 TRANSFERT POP UP long
DTREVL3.3M	EVL®	TREVL 3,3 M TRANSFERT PICK UP JAUNE
DTREVL4SA	EVL®	TREVL 4 SA TRANSFERT PICK UP BLEU
DTREVL5SA	EVL®	TREVL 5 SA TRANSFERT PICK UP MAGENTA
DTNVEVL3.3	Digital Solutions	Transfert numérique titane pour implant EVL® 3.3 + vis
DTNVEVL4	Digital Solutions	Transfert numérique titane pour implant EVL® 4 + vis
DTNVEVL5	Digital Solutions	Transfert numérique titane pour implant EVL® 5 + vis
DDIEVL3.3	Digital Solutions	DIEVL 3,3 ANALOGUE EVL LONG. 11.5 MM
DDIEVL4SA	Digital Solutions	DIEVL 4 SA ANALOGUE EVL LONG. 11.5 MM
DDIEVL5SA	Digital Solutions	DIEVL 5 SA ANALOGUE EVL LONG. 11.5 MM

Prothèse provisoire direct implant + vis de fixation

DTUBEVL3.3NI	EVL®	TUB EVL 3.3 NI MOIGNON PROVISoire ROTAT + VIS
DTUBEVL4	EVL®	TUB EVL 4 MOIGNON PROVISoire + VIS
DTUBEVL4NI	EVL®	TUB EVL 4 NI MOIGNON PROVISoire ROTAT + VIS
DTUBEVL5	EVL®	TUB EVL 5 MOIGNON PROVISoire + VIS
DTUBGLAB	MULTI GAMME	TUB GLAB GAINÉ CALCINABLE

Restaurations scellées

DFMTA3.3H0-00	EVL®	FMTA 3.3 H0-00 MOIGNON DROIT - EVL + VIS
DFMTA3.3H0-8	EVL®	FMTA 3.3 H0-8 MOIGNON 8° EVL + VIS
DFMTA3.3H0-15	EVL®	FMTA 3.3 H0-15 MOIGNON 15° EVL + VIS
DFMTA3.3H0-23	EVL®	FMTA 3.3 H0-23 MOIGNON 23° EVL + VIS
DFMTA3.3H2-00	EVL®	FMTA 3.3 H2-00 MOIGNON DROIT - EVL + VIS
DFMTA3.3H2-8	EVL®	FMTA 3.3 H2-8 MOIGNON 8° EVL + VIS
DFMTA3.3H2-15	EVL®	FMTA 3.3 H2-15 MOIGNON 15° EVL + VIS
DFMTA3.3H2-23	EVL®	FMTA 3.3 H2-23 MOIGNON 23° EVL + VIS
DFMTA4H0-00	EVL®	FMTA 4 H0-00 MOIGNON DROIT - EVL + VIS
DFMTA4H0-8	EVL®	FMTA 4 H0-8 MOIGNON 8° EVL + VIS
DFMTA4H0-15	EVL®	FMTA 4 H0-15 MOIGNON 15° EVL + VIS
DFMTA4H0-23	EVL®	FMTA 4 H0-23 MOIGNON 23° EVL + VIS
DFMTA4H2-00	EVL®	FMTA 4 H2-00 MOIGNON DROIT - EVL + VIS
DFMTA4H2-8	EVL®	FMTA 4 H2-8 MOIGNON 8° EVL + VIS
DFMTA4H2-15	EVL®	FMTA 4 H2-15 MOIGNON 15° EVL + VIS
DFMTA4H2-23	EVL®	FMTA 4 H2-23 MOIGNON 23° EVL + VIS
DFMTA5H0-00	EVL®	FMTA 5 H0-00 MOIGNON DROIT - EVL + VIS
DFMTA5H0-8	EVL®	FMTA 5 H0-8 MOIGNON 8° EVL + VIS
DFMTA5H0-15	EVL®	FMTA 5 H0-15 MOIGNON 15° EVL + VIS
DFMTA5H0-23	EVL®	FMTA 5 H0-23 MOIGNON 23° EVL + VIS
DFMTA5H2-00	EVL®	FMTA 5 H2-00 MOIGNON DROIT - EVL + VIS
DFMTA5H2-8	EVL®	FMTA 5 H2-8 MOIGNON 8° EVL + VIS
DFMTA5H2-15	EVL®	FMTA 5 H2-15 MOIGNON 15° EVL + VIS
DFMTA5H2-23	EVL®	FMTA 5 H2-23 MOIGNON 23° EVL + VIS
DFMTR3.3M	EVL®	FMTR 3,3 M FAUX MOIGNON DROIT TRANSVIS
DFMTR4SA	EVL®	FMTR 4 SA FAUX MOIGNON DROIT TRANSVIS
DFMTR5SA	EVL®	FMTR 5 SA FAUX MOIGNON DROIT TRANSVIS

Embases titane + vis de fixation

DEVEVL3.3	EVL®	Embase pour pilier personnalisé EVL® Ø 3.3 mm + vis
DEVEVL4	EVL®	Embase pour pilier personnalisé EVL® Ø 4 mm + vis
DEVEVL5	EVL®	Embase pour pilier personnalisé EVL® Ø 5 mm + vis

Ébauches + vis de fixation

DLABPMVEVL3.3	Digital Solutions	Ebauche EVL® 3.3 S3DEL + vis
DLABPMVEVL4	Digital Solutions	Ebauche EVL® 4 S3DEL + vis
DLABPMVEVL5	Digital Solutions	Ebauche EVL® 5 S3DEL + vis

Restaurations transvissées plurales : MULTI

DMULTIE3.3-0PACK	EVL®	MULTI E 3,3-0 PACK Pilier + gaine + vis + préhens
------------------	------	---

DMULTIE3.3-2	EVL®	MULTI E 3,3-2 PILIER Ø3.3 HAUT 2 + PREHENS
DMULTIE3.3-4	EVL®	MULTI E 3,3-4 PILIER Ø3.3 HAUT 4 + PREHENS
DMULTIE4-0	EVL®	MULTI E 4-0 PILIER Ø4 HAUT 0 + PREHENS
DMULTIE4-2	EVL®	MULTI E 4-2 PILIER Ø4 HAUT 2 + PREHENS
DMULTIE4-4	EVL®	MULTI E 4-4 PILIER Ø4 HAUT 4 + PREHENS
DMULTIE5-0	EVL®	MULTI E 5-0 PILIER Ø5 HAUT 0 + PREHENS
DMULTIE5-2	EVL®	MULTI E 5-2 PILIER Ø5 HAUT 2 + PREHENS
DMULTIE5-4	EVL®	MULTI E 5-4 PILIER Ø5 HAUT 4 + PREHENS
DTRMUV3.3	MULTI GAMME	TRMUV3.3 VIS + TRANSFER
DTRMUV4	MULTI GAMME	TRMUV 4 VIS + TRANSFERT
DTRMUV5	MULTI GAMME	TRMUV 5 VIS + TRANSFERT
DTNMUNR	MULTI Digital Solutions	Transfert numérique titane pour pilier MULTI NR
DTNMUST	MULTI Digital Solutions	Transfert numérique titane pour pilier MULTI ST
DTNMUWD	MULTI Digital Solutions	Transfert numérique titane pour pilier MULTI WD
DMULTIDIE3.3N	MULTI Digital Solutions	Analogue MULTI 3.3 Numérique
DMULTIDIE4N	MULTI Digital Solutions	Analogue MULTI 4 et ST Numérique
DMULTIDIE5N	MULTI Digital Solutions	Analogue MULTI 5 et WD Numérique
DMULTILAB3.3	MULTI GAMME	MULTI LAB 3,3 GAINÉ LABO 3.3 CALCI PMMA
DMULTILAB4	MULTI GAMME	MULTI LAB 4 GAINÉ LABO 4 CALCI PMMA
DMULTILAB5	MULTI GAMME	MULTI LAB 5 GAINÉ LABO 5 CALCI PMMA
DGTMU3.3	MULTI GAMME	GTMU 3,3 GAINÉ CALCI MULTI PMMA + VIS
DGTMU4	MULTI GAMME	GTMU 4 GAINÉ CALCI MULTI PMMA + VIS
DGTMU5	MULTI GAMME	GTMU 5 GAINÉ CALCI MULTI PMMA + VIS
DEVMULTINR	MULTI GAMME	Embase pour pilier MULTI NR + vis
DEVMULTIST	MULTI GAMME	Embase pour pilier MULTI ST + vis
DEVMULTIWD	MULTI GAMME	Embase pour pilier MULTI WD + vis
DTUBMULTINR	MULTI GAMME	TUB MULTI NR MOIGNON PROVISOIRE METAL + VIS
DTUBMULTINR3.3-0	MULTI GAMME	TUB MULTI NR 3.3-0 MOIGNON PROVISOIRE METAL + VIS
DTUBMULTIST	MULTI GAMME	TUB MULTI ST MOIGNON PROVISOIRE METAL + VIS
DTUBMULTIWD	MULTI GAMME	TUB MULTI WD MOIGNON PROVISOIRE METAL + VIS
DCC3.3EVL C	MULTI GAMME	CC 3,3 EVL C COIFFE COUV COMPACT + VIS CLIP
DCC4EVL C	MULTI GAMME	CC 4 EVL C COIFFE COUV COMPACT + VIS CLIP
DCC5EVL C	MULTI GAMME	CC 5 EVL C COIFFE COUV COMPACT + VIS CLIP

Restaurations transvissées plurales : MUA

DMUA3.32ST18	EVL®	MUA 3.3 2 ST 18° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA3.33ST18	EVL®	MUA 3.3 3 ST 18° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA4SA2.5ST18	EVL®	MUA 4SA 2.5 ST 18° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA4SA2.5ST30	EVL®	MUA 4SA 2.5 ST 30° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA4SA3.5ST18	EVL®	MUA 4SA 3.5 ST 18° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA4SA3.5ST30	EVL®	MUA 4SA 3.5 ST 30° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA5SA2.5WD18	EVL®	MUA 5SA 2.5 WD 18° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA5SA2.5WD30	EVL®	MUA 5SA 2.5 WD 30° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA5SA3.5WD18	EVL®	MUA 5SA 3.5 WD 18° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUA5SA3.5WD30	EVL®	MUA 5SA 3.5 WD 30° PILIER MULTI ANGULE + VIS
DMUACOFFEST	MULTI GAMME	MUA COIFFE ST COIFFE COUV MUA + VIS CLIP
DMUACOFFEWD	MULTI GAMME	MUA COIFFE WD COIFFE COUV MUA + VIS CLIP
DMUATRST	MULTI GAMME	MUA TR ST TRANSFERT PICK-UP MUA + VIS
DMUATRWD	MULTI GAMME	MUA TR WD TRANSFERT PICK-UP MUA + VIS
DTNMUAST	Digital Solutions	Transfert numérique titane pour pilier MUA ST
DMUADIESTN	MULTI GAMME	MUA DIE ST ANALOGUE MUA
DMUAGTRST	MULTI GAMME	MUA GTR ST GAINÉ TRANS CALCI MUA + 2VIS
DMUAGTRWD	MULTI GAMME	MUA GTR WD GAINÉ TRANS CALCI MUA + 2VIS
DEVMUAST	MULTI GAMME	Embase pour pilier MUA ST + vis
DTUBGLAB	MULTI GAMME	TUB GLAB GAINÉ CALCINABLE TUB
DTUBMUAST	MULTI GAMME	TUB MUA ST MOIGNON PROVISOIRE METAL + VIS
DTUBMUAWD	MULTI GAMME	TUB MUA WD MOIGNON PROVISOIRE METAL + VIS

Prothèses amovibles

DLOCATORPACK	MULTI GAMME	Attachement pour pilier Locator® + assortiment de rétention (par 2)
DLOCJ0	MULTI GAMME	Sachet de 4 inserts LOCATOR® de laboratoire noirs
DLOCJ1	MULTI GAMME	Sachet de 4 anneaux LOCATOR® bleus, rétention faible
DLOCJ2	MULTI GAMME	Sachet de 4 anneaux LOCATOR® rose, rétention moyenne
DLOCJ3	MULTI GAMME	Sachet de 4 anneaux LOCATOR® blancs, rétention forte
DLOCJ4	MULTI GAMME	Sachet de 4 anneaux LOCATOR® rouges, angul. élevée, rétention faible
DLOCJ5	MULTI GAMME	Sachet de 4 anneaux LOCATOR® verts, angul. élevée, rétention forte
DLOCJ6	MULTI GAMME	Sachet de 4 anneaux LOCATOR® orange, angul. élevée, rétention moy.
DLOCTransfert	MULTI GAMME	Transferts pour pilier Locator® (par 4)
DLOC4MMANALOG	MULTI GAMME	Analogues LOCATOR Ø4 (x4)
DBALLPLUS3.3	EVL®	BALL PLUS 3,3 PILIER BALL EVL PLUS
DBALLPLUS3.3L	EVL®	BALL PLUS 3,3 L PILIER BALL EVL PLUS
DBALLPLUS4	EVL®	BALL PLUS 4 PILIER BALL EVL PLUS
DBALLPLUS4L	EVL®	BALL PLUS 4 L PILIER BALL EVL PLUS
DBALLPLUS5	EVL®	BALL PLUS 5 PILIER BALL EVL PLUS
DBALLPLUS5L	EVL®	BALL PLUS 5L PILIER BALL EVL PLUS
DBPELPSTD055890	MULTI GAMME	DBP ELP STD 055 890 CUPULE DALBO PLUS ELLIPTIC
DBBPINSERTSTD	MULTI GAMME	DBP INSERT STD PIÈCE RETENTIVE DALBO PLUS
DBBPINSERTRSOFT050	MULTI GAMME	DBP INSERT R SOFT 0500 0068 REPRISE RETENTIVE DALBO PLUS

DDBPINSERTR055687

MULTI GAMME

DBP INSERT R 055 687 REPRISE RETENTIVE DALBO PLUS

Vis

DVISSCREWPLUS3.3
DVISSCREWPLUS3.3XL
DVISSCREWPLUS4ET5
DVISSCREWPLUS4ET5X
DVMU1.2T
DVMU1.2TM1.6
DVPEG3.3
DVPEG4-5SA
DVTRL3.3M
DVTRL4ET5SA
DVTRPOP3.3
DVTRPOP4ET5

EVL®
EVL®
EVL®
EVL®
MULTI GAMME
MULTI GAMME
EVL®
EVL®
EVL®
EVL®
EVL®
EVL®

VIS SCREW PLUS 3.3 VIS M2 TETE 60° L6 MM
VIS SCREW PLUS 3.3 XL VIS LABO M2 TETE 60° L18.7 MM
VIS SCREW PLUS 4 ET 5 VIS M2 TETE 60° L8.3 MM
VIS SCREW PLUS 4 ET 5 XL VIS LABO M2 TETE 60° L21 MM
VMU 1,2 T VIS PROTHESE MULTI STD L5 MM
VMU 1,2 T M1.6 VIS PROTHESE MUA L4.6 MM
VPEG 3,3 VIS PROTHESE EVL L6.7 MM
VPEG 4-5 SA VIS PROTHESE EVL L8.8 MM
VTRL 3.3 M VIS TRANSFERT PICK-UP
VTRL 4 ET 5 SA VIS TRANSFERT PICK-UP
VTR POP 3.3 VIS TRANSFERT POP-UP Long 10.4
VTR POP 4 ET 5 VIS TRANSFERT POP-UP Long 12.7


Tournevis / clés

DCPLM
DCPCM
DCPMM
DCM1.2HL
DCM1.2H
DCM1.2HC
DCAB1.2HL
DCAB1.2H
DCAB1.2HC
DCPM-2
DCPLA
DCPMA
DCPCA
DPM1.6
DTLOCAT

MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME
MULTI GAMME

CPLM CLE MANUELLE HEX.3 LONGUE
CLE HEXAGONE 3 MANUELLE-CLIQUET
CPMM CLE MANUELLE HEX.3 MOYENNE
CM1.2HL CLE MANUELLE-CLIQUET L28.5 X40
CM1.2H CLE MANUELLE-CLIQUET L22.5 X40
CM1.2HC CLE MANUELLE-CLIQUET L16.5 X40
CAB1.2HL CLE CONTRE ANGLE A BUTEE L36
CAB1.2H CLE CONTRE ANGLE A BUTEE L30
CAB1.2HC CLE CONTRE ANGLE A BUTEE L24
CPM-2 CLE DE VISSAGE MANUEL RETENTIV
CPLA CLE CONTRE-ANGLE HEX.3 LONGUE
CPMA CLE CONTRE-ANGLE HEX.3 MOYENNE
CPCA CLE CONTRE-ANGLE HEX.3 COURTE
P M1.6 PREHENSEUR M1.6
Tournevis Universal3 en 1 pour système LOCATOR®

Arsenal thérapeutique Global D

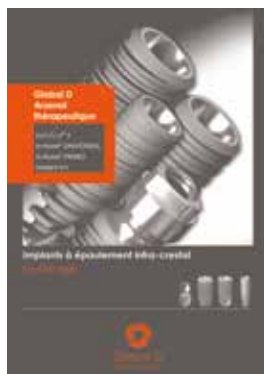

Implants à épaulement
infra-crestal
La chirurgie




Implants à épaulement
infra-crestal
La prothèse




Implants à épaulement
supra-crestal
La chirurgie




twinKon®
La signature biologique

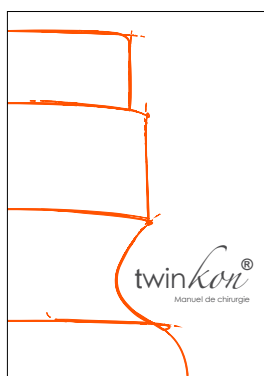

twinKon®
Manuel de chirurgie

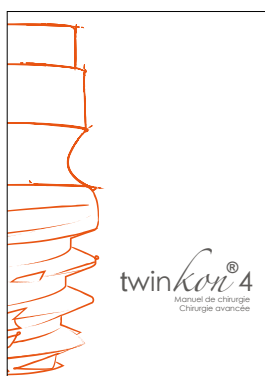


twinKon® 4
Manuel de chirurgie

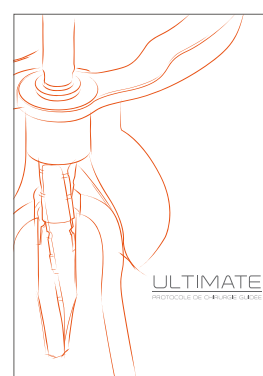


Ultimate
Protocole de chirurgie
guidée




Digital solutions

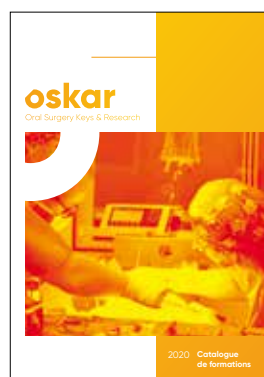


Catalogue formations
oskar

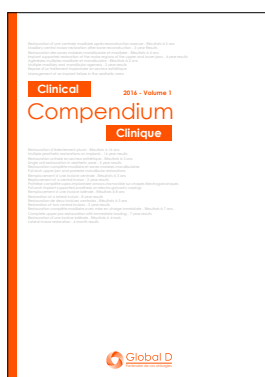

Compendium Vol.1

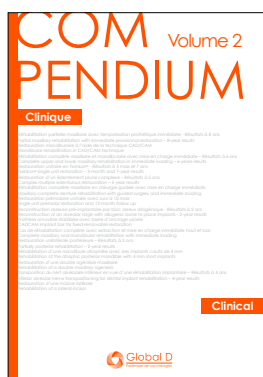

Compendium Vol.2

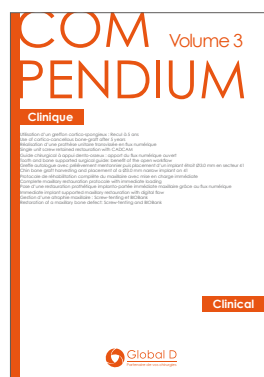

Compendium Vol.3

Domaines d'activités

Implantologie

Chirurgie pré-implantaire

Chirurgie orthognathique

Chirurgie reconstructrice

Chirurgie traumatologique de la face

Chirurgie carcinologique

Cranio-chirurgie

Orthodontie

Formation



ZI de Sacuny
118 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
France

tél. +33 (0)4 78 56 97 00
fax +33 (0)4 78 56 01 63

www.globald.com

Une société du groupe MENIX