

LA GAMME



EMBALLAGE STÉRILE

La membrane est disponible en trois tailles et présentée individuellement dans un double emballage stérile.

BC1520 • 15 x 20 mm

BC2530 • 25 x 30 mm

BC3040 • 30 x 40 mm

BIOBank Cover® est un dispositif médical stérile à usage unique de classe III.

Ce dispositif médical est un **produit de santé réglementé** qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (CE 2797). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.

Matricel GmbH
BIOBank

 **BIOBank**
L'OS HUMAIN PRÉSERVÉ ET RÉGÉNÉRÉ

3 rue Georges Charpak
77127 Lieusaint • France
TÉL. +33 1 64 42 59 65
FAX +33 1 64 42 59 60
commercial@biobank.fr
WWW.BIOBANK.FR




9-01-PC2.02/24 • Conception graphique • d'unicité&autre

 **BIOBank**
L'OS HUMAIN PRÉSERVÉ ET RÉGÉNÉRÉ

**BIOBank
Cover®**

MEMBRANE BARRIÈRE
POUR PROCÉDURES
ROG* ET RTG**

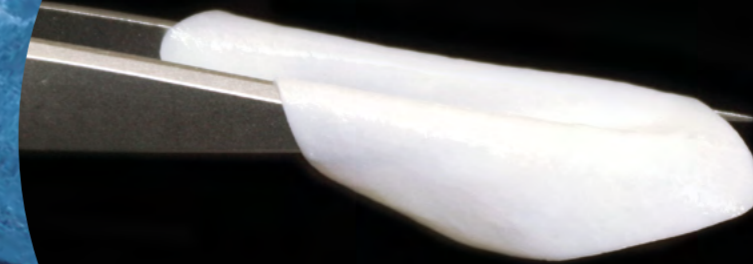

*RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDÉE
**RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE GUIDÉE



« EXPERTS EN CHIRURGIE
MAXILLOFACIALE, ORALE
ET DENTAIRE DEPUIS
PLUS DE 20 ANS, NOUS SOMMES
ENGAGÉS À PROMOUVOIR
DES PRODUITS DE QUALITÉ
RÉPONDANT AUX BESOINS
DE NOS CLIENTS »

BIOBank QUI SOMMES NOUS ?

- Première banque française d'allogreffes osseuses, BIOBank est une entreprise indépendante qui **bénéficie de la certification ISO 13485** et met son expertise au service de la santé depuis plus de 20 ans.
- **Autorisée par l'ANSM** (Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé), la société assure l'ensemble des activités d'une banque de tissus, du recueil des têtes fémorales et coupes fémorotibiales jusqu'à la transformation des greffons osseux.



L'ADN de BIOBank

QUALITÉ


BIOBank s'attache à offrir des produits et services d'une qualité irréprochable.

RIGUEUR

En appliquant les normes et les règlements les plus stricts, **BIOBank garantit la sécurité de ses produits.**

INNOVATION

Pour répondre aux besoins actuels et futurs des chirurgiens et des patients, **BIOBank investit toujours plus dans la recherche et le développement.**

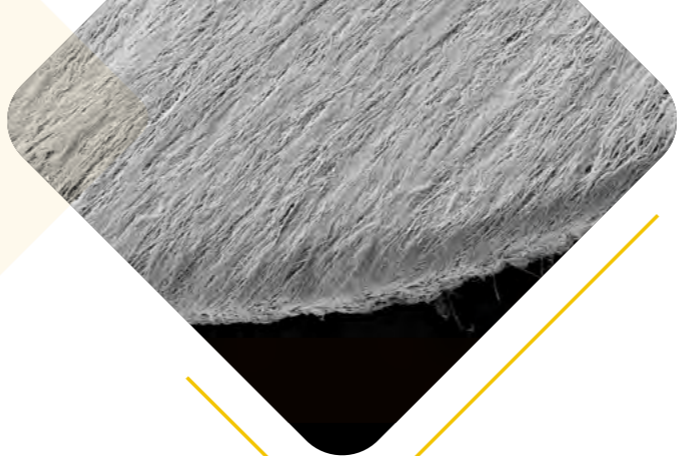

BIOBank Cover®

Membrane barrière pour les procédures de régénération osseuse guidée et de régénération tissulaire guidée.

BIOBank Cover® est une membrane issue de tissus porcins hautement purifiés selon des procédés de fabrication contrôlés et standardisés. BIOBank Cover® est composée d'un **réseau de collagène** et de **fibres d'élastine**. Elle est **non réticulée, non orientée**, facilitant ainsi son positionnement.

Grâce à son délai de **résorption** lent, durant une période de **20 semaines**^{1,2}, la membrane BIOBank Cover® fournit un effet barrière contre l'interposition des tissus mous dans l'espace créé dans le cadre des protocoles de régénération osseuse guidée. Le réseau fibreux de la membrane fournit une stabilité mécanique et prévient la migration du matériau osseux de greffe.



Élasticité³



Résistance à la rupture³

LES BÉNÉFICES

Fournit une barrière physique pendant une période de 20 semaines

Favorise le gain osseux pour supporter la pose de l'implant

¹ Horizontal Ridge Augmentation with a Novel Resorbable Collagen Membrane: A Retrospective Analysis of 36 Consecutive Patients. Wessing B, Emmerich M, Bozkurt. Int J Periodontics Restorative Dent. 2016; 36(2): 179-87

² Differences in degradation behavior of two non-crosslinked collagen barrier membranes: an invitro and in vivo study. Bozkurt A, Apel C, Selhaus B, Wessing B, Hilgers R-D & al. Clin Oral Implants Res. 2014; 25(12): 1403-11

³ Tensile Properties of Three Selected Collagen Membranes. Perry Raz, 1 Tamar Brosh, 2 Guy Ronen, 3 and Haim Tal1. BioMed Research International Volume 2019, Article ID 5163603.